

blink-n-clean

15ml

For renere og mere behagelige kontaktlinser under brug
Kirkkaammiita ja mukavammilla tuntuvat piilolinssit

DA blink-n-clean dråber er udviklet til at give brugere af kontaktlinser renere og mere behagelige linser hele dagen, uden at du behøver at tage dem ud først. Denne milde opløsning gør mere end blot at fugte linsene igen, den skyller naturligt snavs og protein væk og efterlader linsene rene, friske og behagelige. Især nyttigt for linser til langvarig brug, eller når linsene bruges i længere tidsrum.

IKKE NØDVENDIGT AT TAGE LINSERNE UD

Bruksanvisning:

- Påfør én eller to dråber i hvert øje op til fire gange dagligt
- Blink for at vaske linsen

Forsigtighedsregler:

- Alle instruktioner skal følges. Undladelse af at gøre det kan resultere i alvorlig øjeninfektion eller -skade.
- Må ikke bruges, hvis plomberingen er brudt eller mangler
- Luk omgående flasken tæt til efter brug
- Må ikke bruges, hvis du er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne
- Må ikke bruges mere end fire gange dagligt
- Væsken må ikke drikkes
- Opbevares mellem 5 °C og 25 °C
- Opbevares utilgængeligt for børn
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen
- Kassér eventuelt resterende opløsning 60 dage efter, at flasken åbnes første gang
- Lad ikke flaskepidsen røre ved nogen overflader, den kan blive forurenet

Tal med øjenlægen, hvis du fortsat har problemer.

Indeholder:

Natriumchlorid
Tromethamin
Hydroxypropylmethylcellulose
Tyloxapol
EDTA
Polyhexametylenbiguanid 0,0001 %
Renset vand

FI blink-n-clean-tippojen ansiosta piilolinssit tuntuvat päivän ilman, että ne tarvitsee ottaa ensin pois. Tämä mieto liuos ei vain kostuta linssettä uudelleen, vaan se myös huuhtelee linseistä luonnollisen lian ja proteiineräyämät pois jättäen linssit kirkaan, raikkaan ja miellyttävän tuntuiseksi. Erityisen hyödyllinen jatkuvakäyttöisille piilolinsselle tai käytettäessä piilolinssessä pitkän aikaa.

PIIOLINSSEJÄ EI TARVITSE OTTAA POIS

Käyttöohjeet:

- Laita yksi tai kaksi tippaa kumpaankin silmään enintään neljä kertaa päivässä
- Räpytele linssien huuhtomiseksi

Varoimet:



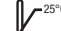






- Noudata kaikkia käyttöohjeita. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan silmätulehdukseen tai -vammaan.
- Älä käytä, jos sinetti on murrettu tai se puuttuu
- Sulje pullo tiiviisti heti käytön jälkeen
- Älä käytä, jos olet allerginen jollekin aineosalle
- Älä käytä enempää kuin neljä kertaa päivässä
- Liuosta ei saa juoda
- Säilytettävä 5–25 °C:ssa
- Pidettävä poissa lasten ulottuvilta
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen
- Hävitä kaikki jäljellä oleva neste 60 päivän kuluttua siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran
- Liikaantumisen välttämiseksi pullon kärkeä ei saa koskettaa mihinkään pintaan

Jos ongelmia jatkuvat, ota yhteyttä silmälääkäriin tai optikkoon.

Sisältö:

Natriumkloridi
Trometamiini
Hydroksipropyylimetyyliselluloosa
Tyloxapoli
EDTA
Polyheksametyleeni-biguanidi 0,0001 %
Puhdistettu vesi

Symboler • Symbolit

 Se brugsanvisningen Katsó käyttöohjeesta	 Fremstiller Valmistaja	 25°C Temperaturgräns Lämpötilarajitus
 STERILE A Steril. Aseptisk teknik Steril. Aseptinen tekniikka	 LOT Batchnummer Eräkoodi	 5°C
 Må ikke bruges hvis emballagen er beskadiget Ei saa käyttää, jos pakkauksen on vaurioitunut	 Användes inden Vimeinen käyttöpäivä	 60D Kassér eventuelt resterende opløsning 60 dage efter, at flasken åbnes første gang Hävittä kaikki jäljellä oleva neste 60 päivän kuluttua siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran

CE 0123

STERILE A

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
blink-n-clean is a trademark owned by Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., 2018

blink-n-clean

15ml

Gjør kontaktlinsene klarere og mer behagelige å gå med
For skarp och klar syn, samt komfortabelt kontaktlinsebärande

NO blink-n-clean dråper er formulert for å gi kontaktlinsebrukere klarere og mer behagelige linser hele dagen uten å måtte fjerne dem først. Denne skånsom væsken gjør mer enn bare å fukte på nytt, den vasker bort naturlig rusk og proteiner som har samlet seg, slik at linsene virker klare, oppfrisket og behagelige. Spesielt nyttig til døgnlinser eller hvis linsene brukes i lengre tid av gangen.

DET IKKE NØDVENDIGT Å TA UT LINSENE

Bruksanvisning:

- Ha en eller to dråper i hvert øye opptil fire ganger daglig
- Blunk for å skylle linsen

Forholdsregler:

- Det er nødvendig å følge alle anvisningene. Unnlater man å gjøre det, kan det føre til alvorlig infeksjon eller skader i øynene.
- Skal ikke brukes hvis forseglingen er brutt eller mangler
- Lukk flasken godt igjen umiddelbart etter bruk
- Skal ikke brukes hvis man er overfølsom for noen av ingrediensene
- Skal ikke brukes i mer enn fire ganger daglig
- Ikke drikk oppløsningen
- Opbevares mellom 5 °C og 25 °C
- Opbevares utilgjengelig for barn
- Må ikke brukes etter utløpsdato
- Kast væske som er igjen 60 dager etter at flasken ble åpnet
- For å unngå bakteriell smitte må ikke flaskestoppen komme i berøring med noen overflate

Hvis du fortsatt har problemer, bør du ta disse opp med din øylege.

Innhold:

Natriumklorid
Trometamin
Hydroksipropylmetylcellulose
Tyloxapoli
EDTA (etylendiamin tetraeddiksyre)
Polyheksametylenbiguanid 0,0001 %
Sterilt vann

SV blink-n-clean-droppar är formulerade för att ge linsebärande rena och komfortabla linser, under hela dygnet utan att linserna behöver tas ut. Denna milda men effektiva lösning gör mer än att bara återfuktar linserna, de avlägsnar även smuts och fettpartiklar, samt förhindrar proteinuppbyggnad och avlagringar, och gör kontaktlinserna rena, fräscha och komfortabla. Särskilt användbart för dygnet runt bärande av linser.

KONTAKTLINSERNA BEHÖVER INTE TAS UT

Bruksanvisning:

- Applicera en eller två droppar i varje öga upp till fyra gånger dagligen
- Blinka för att rengöra kontaktlinsen

Säkerhetsråd:



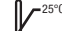






- Alla anvisningar måste följas. Annars kan du få en allvarlig ögoninfektion eller ögonskada.
- Använd inte om säkerhetsförseglingen är bruten eller saknas
- Stäng flaskan noga omedelbart efter användning
- Använd inte lösningen om du är allergisk mot något av innehållsämnen
- Använd högst fyra gånger per dag
- Drink inte lösningen
- Förvaras mellan 5 och 25 °C
- Förvaras utom räckhåll för barn
- Använd inte efter utgångsdatum
- Kassera eventuellt överbliven lösning 60 dagar efter det att flaskan öppnats
- För att undvika kontamination får flaskans spets inte vidröra något

Om problemen fortsätter, vänd dig till din ögonläkare

Innehåller:

Natriumklorid
Trometamin
Hydroxypropylmetylcellulosa
Tyloxapoli
EDTA
Polyhexametylenbiguanid 0,0001 %
Renat vatten

Symboler • Symboler

 Les brugsanvisningen Se brugsanvisningen	 Produzent Tillverkare	 25°C Temperaturbegrensning Temperaturgräns
 STERILE A Steril. Aseptisk teknik Steril. Aseptisk teknik	 LOT Batch-kode Batchkod	 5°C
 Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet Använd inte om förpackningen är skadad	 Brukes innen Utlöpsdatum	 60D Kast væske som er igjen 60 dager etter at flasken ble åpnet Kassera eventuellt överbliven lösning 60 dagar efter det att flaskan öppnats

AM70432FL12D
Revision Date: 05/2018

XXXXX XX